


Attends® Slip Active



Attends - das System mit 10 Saugstärken bei Blasenschwäche und Inkontinenz

Attends Slip Active ist geeignet für mobile aktive Personen mit starker Harn- und/oder Stuhlinkontinenz.

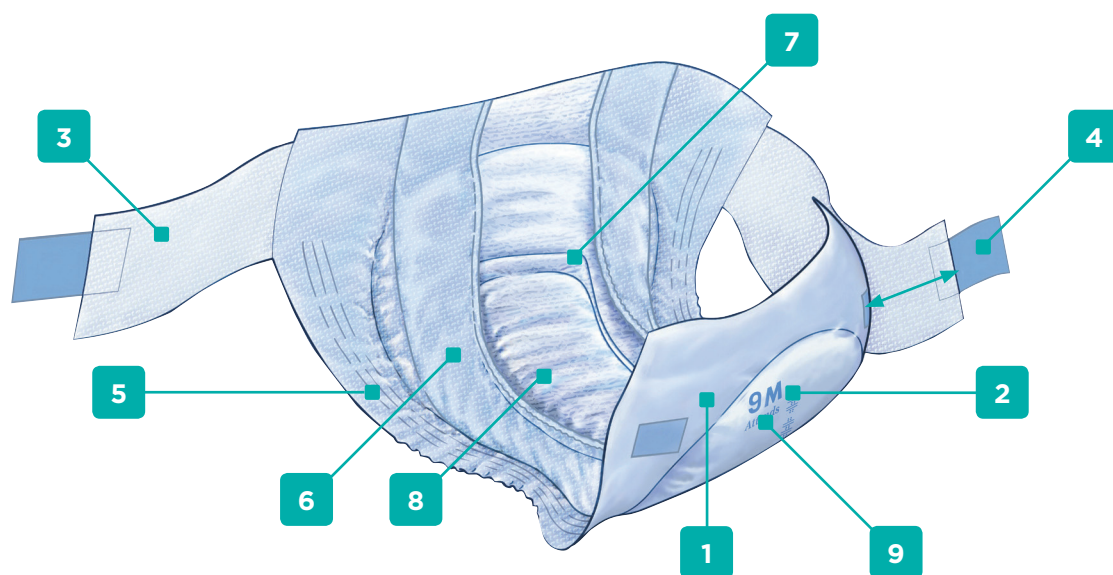

- | | | |
|--|--|---|
| <p>1 Weiße flüssigkeitundurchlässige Außenseite als Auslaufschutz.</p> | <p>2 Der Nässeindikator auf der Rückseite zeigt durch Verschwimmen an, wann das Produkt gewechselt werden muss.</p> | <p>3 Die atmungsaktiven textilartigen Seitenflügel lassen mehr Luft an die Haut. Das trägt zur Hautgesundheit bei.</p> |
| <p>4 Durch den innovativen 2-Schritt-Verschluss lässt sich der Slip Active leicht und schnell anlegen. Mit Hilfe des Klettverschlusses den Slip vorfixieren, bei Bedarf korrigieren, dann mit den breiten Klebestreifen verschließen.</p> | <p>5 Mit geformten Beinbündchen für bestmöglichen Sitz und Auslaufschutz.</p> | <p>6 Auslaufsperrern sorgen für bestmöglichen Auslaufschutz.</p> |
| <p>7 Anatomisch geformter Saugkern für eine bequeme Passform.</p> | <p>8 Leistungsstarker Saugkern für verbesserten Auslaufschutz, optimale Hauttrockenheit und Geruchsbindung.</p> | <p>9 Größe und Saugstärke sind diskret auf der Außenseite aufgedruckt.</p> |

Weitere Informationen unter:
www.attends.at www.attends.ch

Absorption / Größe

| | | Stück / Beutel Stück / Karton Stück / Palette | EAN 7332152 Packung / Karton | PZN Packung/Karton | Hilfsmittelpositionsnummer | Bauch- / Hüftumfang in cm | Außenseite Material | Saugkern Material | Innenseite Material | Atmungsaktiv | Elastische Seitenbündchen | Auslaufsperrin | Wiederverschließbares Fixiersystem | Geruchsbindung (Odour Protection) | Quick-Dry Technologie |
|----|-------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 8 | Attends Slip Active Medium | 28 4 x 28 24 x 4 x 28 | 200728 200735 | 2525273 2534906 | 15.25.03.1215 | 75 - 110 | Poly- ethylen | 2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superab- sorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht | Vlies | Ja - Seiten- flügel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Attends Slip Active Large | 28 4 x 28 16 x 4 x 28 | 201329 201336 | 2553944 2553950 | 15.25.03.2233 | 100 - 145 | Poly- ethylen | 2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superab- sorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht | Vlies | Ja - Seiten- flügel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Attends Slip Active Medium | 28 4 x 28 24 x 4 x 28 | 201503 201510 | 2553967 2883973 | 15.25.03.1216 | 75 - 110 | Poly- ethylen | 2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superab- sorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht | Vlies | Ja - Seiten- flügel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Attends Slip Active Large | 28 4 x 28 16 x 4 x 28 | 201381 201398 | 2553996 2554004 | 15.25.03.2234 | 100 - 145 | Poly- ethylen | 2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superab- sorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht | Vlies | Ja - Seiten- flügel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Attends Slip Active Medium | 28 4 x 28 24 x 4 x 28 | 201404 201411 | 2554010 2554027 | 15.25.03.1217 | 75 - 110 | Poly- ethylen | 2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superab- sorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht | Vlies | Ja - Seiten- flügel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Attends Slip Active Large | 28 2 x 28 36 x 2 x 28 | 201428 201435 | 2585329 2717050 | 15.25.03.2235 | 100 - 145 | Poly- ethylen | 2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superab- sorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht | Vlies | Ja - Seiten- flügel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



Quick-Dry

Die Quick-Dry-Technologie wirkt direkt unterhalb der Vliesoberfläche des Produktes. Sie nimmt Urin schnell auf und leitet ihn von der Haut weg in den Saugkern. Dort wird der Urin sicher gebunden und eingeschlossen und somit die Haut vor Rücknässe geschützt - zur Gesunderhaltung der Haut. Das Produkt kann mehrere Flüssigkeitsschübe zuverlässig aufnehmen - für optimalen Auslaufschutz.



Hautfreundlicher pH-Wert

Die Saugkern-Technologie mit Aktivfasern in der Aufnahmeschicht sorgt für einen natürlichen, hautfreundlichen pH-Wert von ca. 4,5. Dies hilft, die Haut zu schützen und sie gesund zu erhalten.



Geruchsbindung Odour Protection

Im Saugkern wird der Urin gebunden und sicher eingeschlossen. Dadurch wird das Entstehen unangenehmer Gerüche verhindert.



Aktivzone

Die Aktivzone im Schrittbereich des Produktes sorgt für besonders hohe Saugfähigkeit dort, wo es darauf ankommt. So kann die Oberfläche schnell wieder abtrocknen. Dies sorgt für optimale Gesunderhaltung der Haut und hervorragenden Auslaufschutz.



Die Hautverträglichkeit von Attends Slip Active ist dermatologisch bestätigt durch proDERM, Institut für Angewandte Dermatologische Forschung.