


Attends® Contours Regular



Attends - das System mit 10 Saugstärken bei Blasenschwäche und Inkontinenz



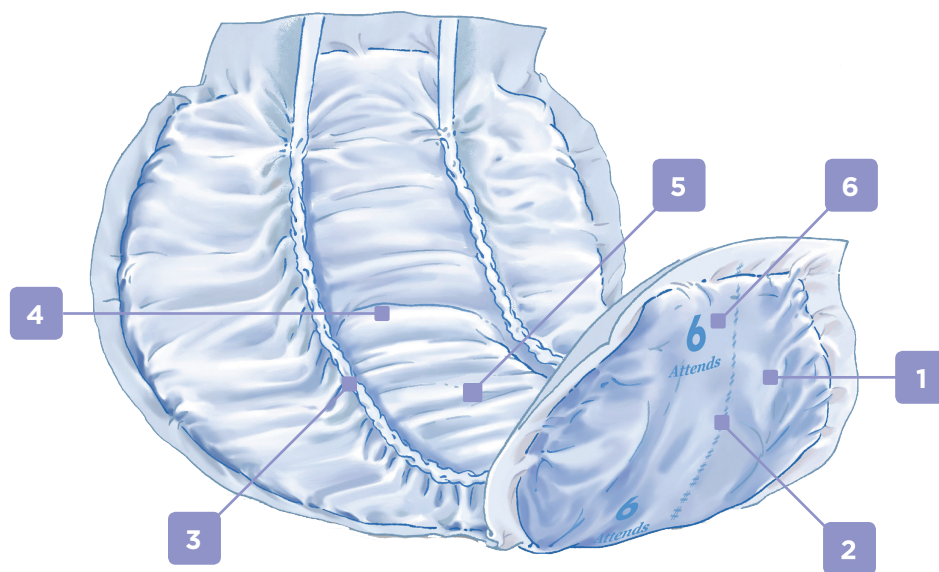




Attends Contours Regular 4 - 10 sind anatomisch geformte Einlagen, entwickelt für mittlere bis starke Harn- und Stuhlinkontinenz.



- | | | |
|---|--|--|
| <p>1 Weiße flüssigkeitundurchlässige Außenseite als Auslaufschutz.</p> | <p>2 Der Nässeindikator auf der Rückseite zeigt durch Verschwimmen an, wann das Produkt gewechselt werden muss.</p> | <p>3 Auslaufsperrern sorgen für bestmöglichen Auslaufschutz. Die Einlagen Contours 4 + 5 haben weiche Seitenbündchen für zusätzliche Auslaufsicherheit.</p> |
| <p>4 Anatomisch geformter Saugkern für eine bequeme Passform.</p> | <p>5 Saugkern für zusätzlichen Auslaufschutz, optimale Hauttrockenheit und Geruchsbindung.</p> | <p>6 Die Saugstärken-Nummer ist auf die Produktrückseite gedruckt, um eine leichte Identifizierung zu ermöglichen.</p> |

Die Einlagen Contours 4 + 5 lassen sich mit Klebeflächen in eng anliegender Unterwäsche befestigen.

Weitere Informationen unter:
www.attends.at www.attends.ch

	Stück / Beutel Stück / Karton Stück / Palette	EAN 732152 Packung / Karton	PZN Packung / Karton	Hilfsmittelpositionsnummer	Länge (cm) Breite im Schritt (cm)	Außenseite Material	Saugkern Material	Innenseite Material	Auslaufsperr	Geruchsbindung (Odour Protection)	Quick-Dry Technologie
Attends Contours Regular 4 *	 42 5 x 42 32 x 5 x 42	203491 203507	6105473 6105496	15.25.01.5263	39 16	Polyethylen	Zellstoff, Superabsorber, Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓
Attends Contours Regular 5	 42 5 x 42 28 x 5 x 42	205211 205228	6105504 6105510	15.25.01.0083	50 21	Polyethylen	Zellstoff, Superabsorber, Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓
Attends Contours Regular 6	 35 4 x 35 24 x 4 x 35	201244 201251	6105527 6105533	15.25.01.1157	58 17,5	Polyethylen	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓
Attends Contours Regular 7	 28 4 x 28 20 x 4 x 28	201268 201275	8756074 8756080	15.25.01.1156	58 17,5	Polyethylen	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓
Attends Contours Regular 8	 28 4 x 28 20 x 4 x 28	201282 201299	8756329 8756341	15.25.01.2156	64,5 19	Polyethylen	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓
Attends Contours Regular 9	 28 4 x 28 20 x 4 x 28	201305 201312	6105591 6105616	15.25.01.2157	70 19,5	Polyethylen	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓
Attends Contours Regular 10	 21 4 x 21 24 x 4 x 21	205525 205532	6810674 6810680	15.25.01.2158	78,5 25	Polyethylen	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓

* Nicht in der Schweiz erhältlich



Quick-Dry

Die Quick-Dry-Technologie wirkt direkt unterhalb der Vliesoberfläche des Produktes. Sie nimmt Urin schnell auf und leitet ihn von der Haut weg in den Saugkern. Dort wird der Urin sicher gebunden und eingeschlossen und somit die Haut vor Rücknässe geschützt - zur Gesunderhaltung der Haut. Das Produkt kann mehrere Flüssigkeitsschübe zuverlässig aufnehmen - für optimalen Auslaufschutz.



Hautfreundlicher pH-Wert

Die Saugkern-Technologie mit Aktivfasern in der Aufnahmeschicht sorgt für einen natürlichen, hautfreundlichen pH-Wert von ca. 4,5. Dies hilft, die Haut zu schützen und sie gesund zu erhalten.



Geruchsbindung

Im Saugkern wird der Urin gebunden und sicher eingeschlossen. Dadurch wird das Entstehen unangenehmer Gerüche verhindert.



Die Hautfreundlichkeit von Attends Contours Regular ist von proDERM, Institut für Angewandte Dermatologische Forschung, bestätigt worden.